

Nürnbergi Rácsos Függesztő

A fájdalom nélküli gyógytorna ideális eszköze

A berendezés lehetővé teszi a beteg testrész, akár az egész test tehermentesítését.

Az eszköz használatával lehetőség nyílik:

- tehermentesített helyzetű mobilizálásra,
- tehermentesített helyzetben ellenállással szemben végzett erőkifejtésre,
- tehermentesített helyzetben fájdalomküszöbig végzett gyakorlatsorozatra.



Megfelelő függesztések alkalmazásával contracturák nyújtásához, valamint különböző tractios kezeléshez kiválóan használható. A gyógyászati eszköz segítségével a terhelés fokozatosan növelhető.

• **Műszaki kivitele:**

Beégetett festéssel védett rácsos acélszerkezet. Vízszintes osztásai rozsdamentes köracélból készülnek.



A Rácsos függesztő „mennyezetén” 225 db horganyzott acélkarika segíti a korrekt függesztést.

A kötélfeszítővel ellátott különböző hosszúságú kötőelemekre karabinerekkel csatlakoztathatók a függesztő hevederek. (Fejfüggesztő, mellkas függesztő mellény, kézfej, lábfej rögzítő, medence heveder, combfüggesztő heveder.)

A kötelek függesztőhevederek rendezett tárolását „S” kampók biztosítják.

• Méret:

2000x2000x2000 mm

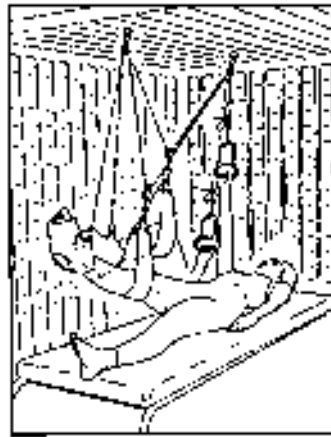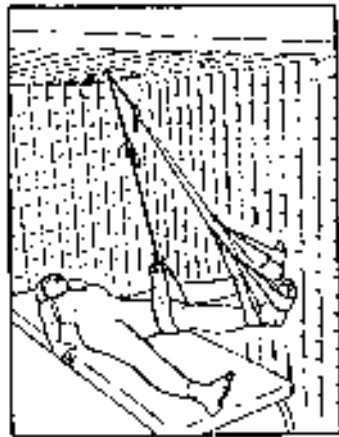

- A Nürnbergi Rácsos Függesztő alá elektromotoros magasságállítósú ágyat kell elhelyezni. Amikor a Terapeuta a hevedereket a páciensen a kötelek segítségével rögzítette, egy nyomógomb megnyomásával lesüllyeszti az ágyat, így a mobilizálandó testrészt már tehermentesített helyzetben a hevederek tartják.



Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal.

Rendelési szám: F116