

## Barbara szanatóriumi ágy



### Műszaki jellemzői:

- Hossza: 2140 mm
- Szélessége: 1050 mm

### Motoros részegység mozgatók:

- Háttámla: ~ 75°
- Derék: ~ 20°
- Magasságállítás: 400-800 mm között

A kétmotoros magasságállítással a Trendelenburg helyzet is előállítható

- Maximális terhelhetőség: 170 kg

### Egyéb jellemzők:

- Kétoldali lecsúsztatható korlátok
- Fekvőfelülete: beégetett festéssel védett acélcsőkeretbe hegesztett laposacélok
- Egyenes vonalvezetése könnyű tisztítást, fertőtlenítést biztosít
- Minden kereke önbeálló és fékezhető

Megjegyzés: Az ágy felár ellenében beégetett festéssel védett fémkorláttal is rendelhető

- Opció: Kapaszkodó elem a fejtámlánál, delta fogantyúval

Rendelési szám: KSZ17



Az ágyvázra az alábbi matracokat fektethetjük:

a) Klinikai matrac (200 x 90 x 12 cm)

Ezt a matracot azért fejlesztették ki, hogy felváltsa a hagyományos vagy elhasználódott matracokat az ágyhoz kötött páciensek magasabb szintű kényelmének (vagy az inkontinencia tekintetében: biztonságának) érdekében.


Poliuretán habszivacs (27 kg/m<sup>3</sup> sűrűségű)

Védőhuzata antibakteriális PVC, tűzálló, zipzárral zárható.

Maximális terhelhetőség a hatékonyság megtartása mellett:  
50- 100kg

Garancia. 1 év megereszkedés ellen

Rendelési szám: KSZ18

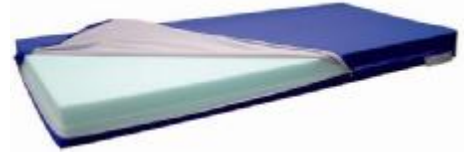

b) Többféle nyomást biztosító matrac (195 x 85 x 17 cm)

Kivágott szivacs elemekből álló matrac, melynek moduljai a hatékonyabb védelem és kényelem érdekében különbözősűrűségűek.

Jelölés a huzaton, hogy megfelelően illeszthető legyen a matrac.


Vízhatlan, hypoallergén PVC huzattal ellátott kivitel.

Nagy rugalmasságú PU habszivacs (40 kg/m<sup>3</sup>)

Maximális terhelhetőség a hatékonyság megtartása mellett: 40-120 kg

Garancia: 2 év megereszkedés ellen

Rendelési szám: KSZ19

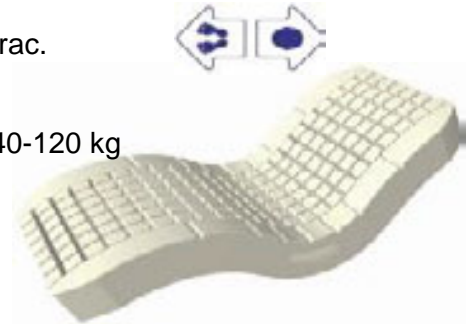

c) Egységes nyomást biztosító matrac (195 x 88 x 17 cm)

Habszivacs alap és különálló öntött blokkok kombinációja. A blokkok képesek követni a test mozgását, így csökkentik a szövetekre nehezedő nyíró erőket. A blokkok között áramló levegő csökkenti a bőr macerációját.

Vízhatlan, hypoallergén PVC matrachuzattal szállítjuk, melyhez kiegészítőként lélegző huzat is rendelhető.

Öntött, rendkívül rugalmas vízzel habosított habszivacs.

Habszivacs sűrűség (40 kg/m<sup>3</sup>)

Felhasználó súlya a hatékonyság megtartásához: 40-100 kg

Garancia: 1 év megereszkedés ellen

Rendelési szám: KSZ20



d) Memória szivacs matrac (195 x 87 x 14 cm)

Különlegessége, hogy teljesen felveszi az emberi test alakját. Enyhe ellennyomást fejt ki.

Felépítése kétrétegű: 10 cm vastag habszivacs alátét, majd 7 cm vastag memória hab matrac.

Viszkoelasztikus habszivacs, sűrűsége (82 kg/m<sup>3</sup>)

Felhasználó súlya a hatékonyság megtartásához: 40 - 120 kg

Garancia: 3 év megereszkedés ellen

Rendelési szám: KSZ21

